

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Leicht-Walker Geh-Podium



Ausstattung


Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Leichte **Carbon-Ausführung** mit
ca. 30% Gewichtsreduktion

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und
eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

- + **Körperlotverschiebung in 4 Richtungen**
ohne Demontage
- + **Parallel verschiebbare Schrittbreite**
ohne Demontage
- + **Einzel einstellbare Schrittlänge**
ohne Demontage
- + **geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag**

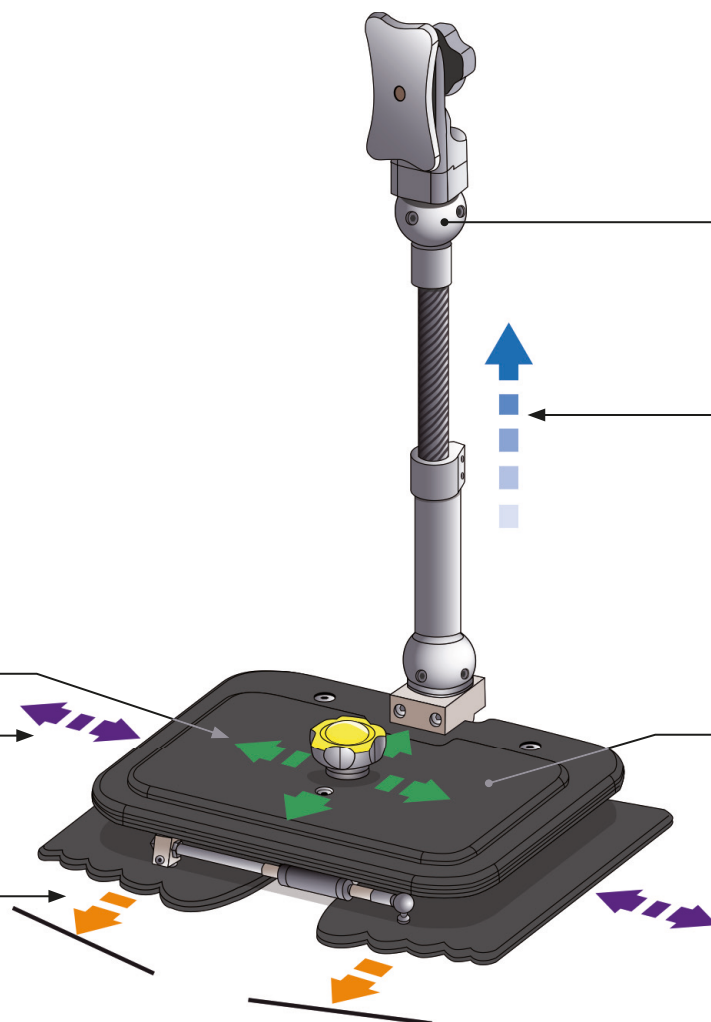


- + 10° über **Justierkerne**
- + Leichtes **Entkoppeln** der Körperschale
- + Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**
- + **Sichere Befestigung**
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung
- Auf Wunsch** liefern wir eine **extra breite Verbindungs-
platte** für größere Fußabstände (Aluminium)
- + **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte
zum Foot-Walker und Stehbrett
- Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**
- Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**
- Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker-klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten

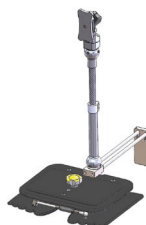


Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- KS -klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- KS -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- KS -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- HG -klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- HG -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- HG -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz

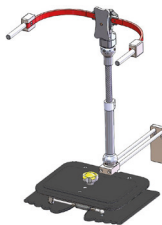


Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- HG-KS -klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- HG-KS -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- HG-KS -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.

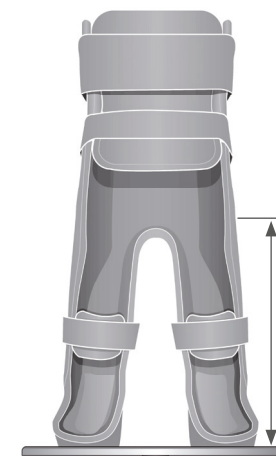

Die minimale Länge von der Verbindungsplatte zum Viersterngriff beträgt bei klein 30 cm, bei mittel und groß 36cm.

