

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-KA-0-Dynamic-0-S



Ausstattung

+ **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs

+ Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **3 Positionen** reduziert oder erhöht werden

+ **Der Beugewinkelanschlag** beträgt für komfortables Sitzen **115°**

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen

Beim Kombiprodukt werden zwei **unterschiedliche Basisaufnahmen** ausgeliefert

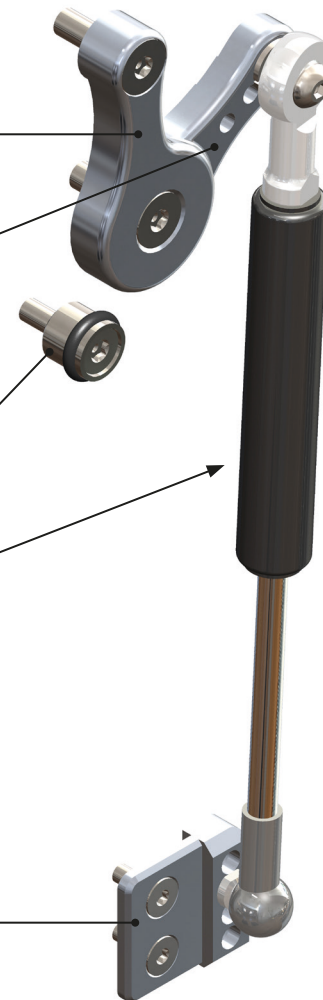


Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Varo-KA-0 Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Varo-KA-0 Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**


Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

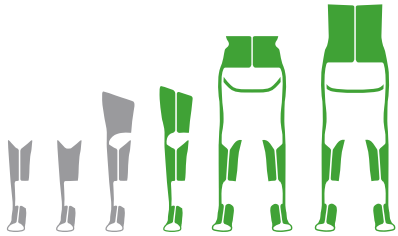

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

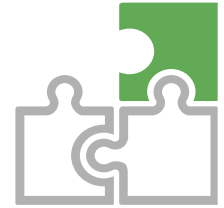

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

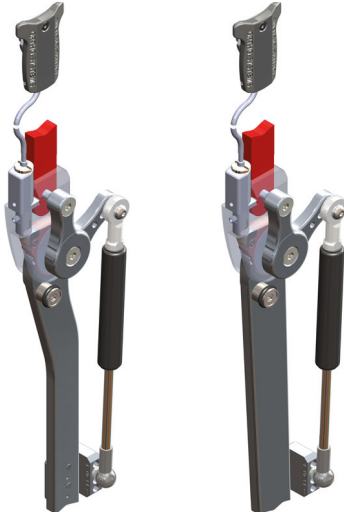Artikel-Nr. Kombiprodukt			Artikel-Nr.	
Varo-KA-0-Dynamic-0-S-28		KAFO	HKAFO/RGO	Dynamic-0-S-28
Varo-KA-0-Dynamic-0-S-30		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar	Dynamic-0-S-30
Varo-KA-0-Dynamic-0-S-32		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar	Dynamic-0-S-32
Varo-KA-0-Dynamic-0-S-36		bis 50 kg	bis 40 kg	Dynamic-0-S-36
		bis 70 kg	bis 60 kg	


Varo-KA-0 mit Schwung

Varo-KA-0 gerade



Varo-KA-0 mit Schwung | Varo-KA-0 gerade

gesperrt	Streckung in	Beugung in	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	Sperrmechanismus	wasserbeständig

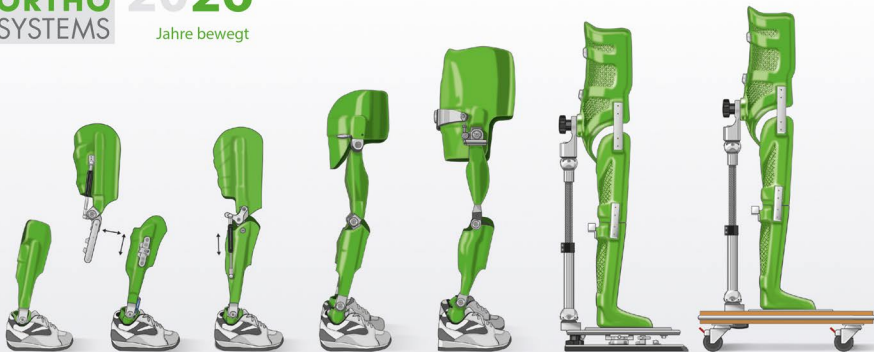

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwischuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de