

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-KA-0 Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

Durch Hochschieben des Satelliten wird der Sperrmechanismus entriegelt; **nach dem Loslassen schließt das Gelenk bei Streckung selbstständig**

+ Bei **Verwendung des Magnetsystems** kann das Gelenk geöffnet bleiben.

+ **Zum Aufrichten** wird der Verschluss durch eine Feder vorgespannt und **schnappt bei voller Streckung selbständig ein**

+ **Winkelanpassungen** von **0°** bis **30°** in 5° Schritten

Funktionserweiterung mit den Zusätzen **Dynamic-0-N** oder **Dynamic-0-S**

Unterteil mit Schwung oder gerade

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger oder kurzem Anker und versetzter Befestigungsschraube

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

maximale Flexion von **130°**

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung


Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links

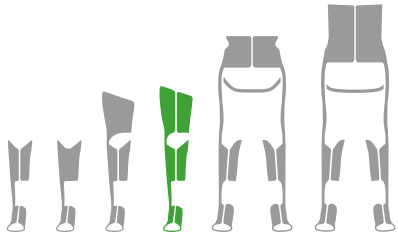


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

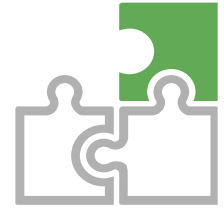

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Gelenk

Artikel-Nr.	KAFO	HKAFO / RGO
Varo-KA-0-28	noch nicht verfügbar	
Varo-KA-0-30	noch nicht verfügbar	
Varo-KA-0-32	bis 50 kg	bis 40 kg
Varo-KA-0-36	bis 70 kg	bis 60 kg

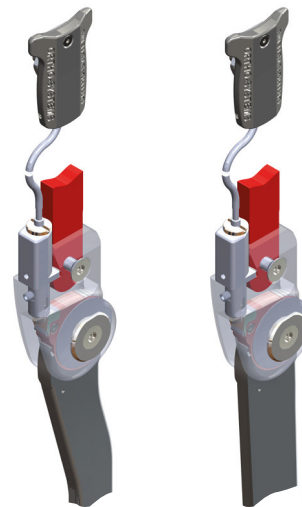

Breite	Stärke	Höhe (Gabel)
-	-	-
-	-	-
41 mm	20,5 mm	73 mm
43 mm	22,0 mm	75 mm

Varo-KA-0 mit Schwung | Varo-KA-0 gerade



gesperrt



Streckung in



Beugung in

rückverlagert



modular

Kraftunterstützung



kein Feilen nötig



Sperrmechanismus

wasserbeständig

