

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-PS-0-Dynamic-0-N



Ausstattung

+ Die **Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs

+ Durch Drehung **des Hebelknochens** kann **von 95 bis 115 Grad** Beugewinkelanschlag variiert werden

+ Durch **Verändern des Krafthebels** kann die **Streckkraft über 7 Positionen** reduziert oder erhöht werden

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen

Beim Kombiprodukt werden zwei **unterschiedliche Basisaufnahmen** ausgeliefert

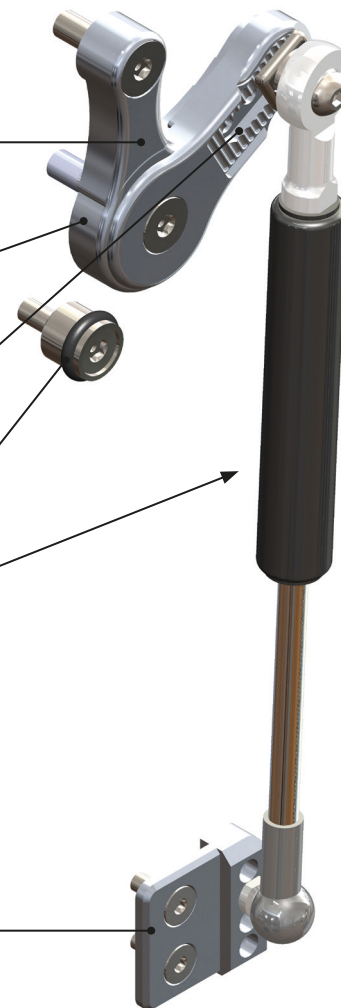


Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Varo-PS-0 Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Varo-PS-0 Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

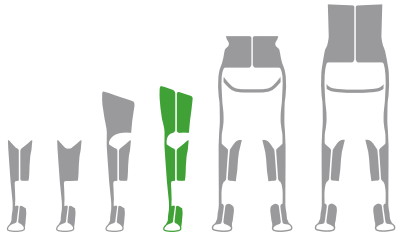

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

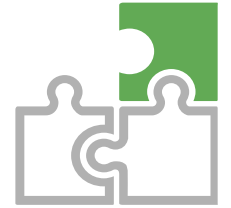

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt	KAFO		HKAFO/RGO		Artikel-Nr.
Varo-PS-0-Dynamic-0-N-28	noch nicht verfügbar				Dynamic-0-N-28
Varo-PS-0-Dynamic-0-N-30	noch nicht verfügbar				Dynamic-0-N-30
Varo-PS-0-Dynamic-0-N-32	bis 50 kg	bis 40 kg			Dynamic-0-N-32
Varo-PS-0-Dynamic-0-N-36	bis 70 kg	bis 60 kg			Dynamic-0-N-36

Varo-PS-0 mit Schwung | Varo-PS-0 gerade

 gesperrt	 Streckung in	 Beugung in	 rückverlagert	 modular	 Kraftunterstützung	 kein Feilen nötig	 Sperrmechanismus	 wasserbeständig
--------------	------------------	----------------	-------------------	-------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

