

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-PS-0 Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

- + **Zum Aufrichten** wird der Verriegelungsknopf durch eine Feder vorgespannt und **schnappt bei voller Streckung selbständig ein**
- + Mit dem Entriegelungsknopf wird der Verschluss entsichert. **Das Knie wird gestreckt, der Sperrstift öffnet sich zum Sitzen**
- + Der **Pre-Selected Verschluss** ermöglicht ein zweistufiges Öffnen und Schließen
- + **Winkelanpassungen** von **0°** bis **30°** in 5° Schritten

Funktionserweiterung mit den Zusätzen
Dynamic-0-N oder **Dynamic-0-S**

Unterteil mit Schwung oder gerade

Abb. links

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kosten-
voranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger oder kurzem Anker und versetzter
Befestigungsschraube

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

maximale Flexion von **130°**


Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit
Bronzebuchse


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

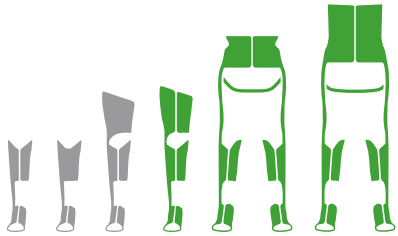


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

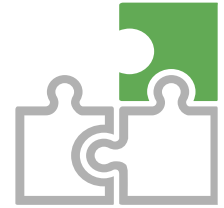

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	KAFO	HKAFO / RGO
Varo-PS-0-28	noch nicht verfügbar	
Varo-PS-0-30	noch nicht verfügbar	
Varo-PS-0-32	bis 50 kg	bis 40 kg
Varo-PS-0-36	bis 70 kg	bis 60 kg

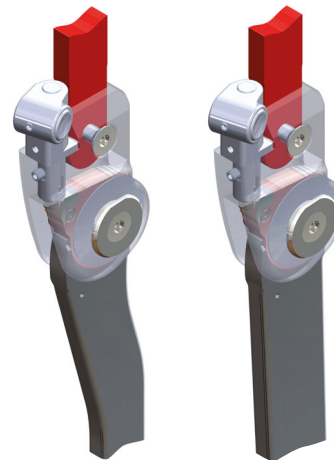


Gelenk

Breite	Stärke	Höhe (Gabel)
-	-	-
-	-	-
41 mm	20,5 mm	73 mm
43 mm	22,0 mm	75 mm

Varo-PS-0 mit Schwung | Varo-PS-0 gerade

gesperrt	Streckung in 40°	Beugung in 130°	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	Sperrmechanismus	wasserbeständig

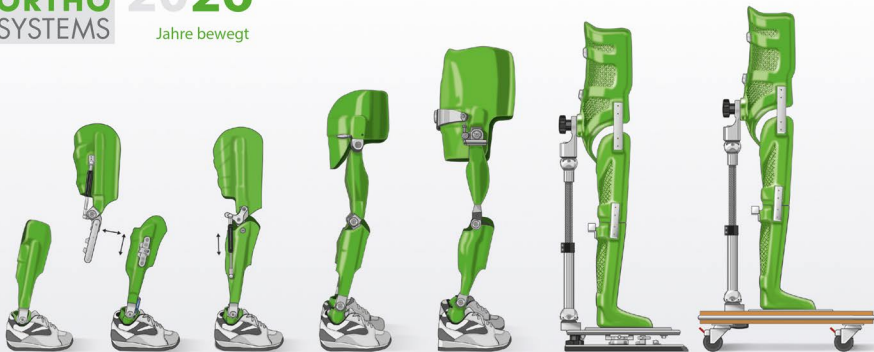

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwichuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de