

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Anziehhilfe

Die Rudi-Anziehhilfe kann bei allen streckunterstützenden G-Dämpfern von ORTHO-SYSTEMS verwendet werden. Sie wird über den Zylinder aufgesteckt, um diesen vorübergehend in einer festen Position zwischen 90° und 150° (30°) zu arretieren. Das Fixieren des Knies in einer definierten Stellung kann das Anziehen der Orthese erleichtern. Zudem lässt sich der Zylinder – sofern er an beiden Enden mit Winkelgelenken ausgestattet ist – mit der Anziehhilfe vollständig entnehmen.



Anziehhilfe-Rudi

Abb. Liber-Extensor-S mit Fixierung bei 95° (85°)


Anwendung bei:

Extensor-S, Extensor-N
Extensor-IN-S, Extensor-IN-N
Strecker
Dynamic-0-S, Dynamic-0-N
Move-0/5, Move-0/5-N

Abb. Indi-Strecker mit ausgebautem G-Dämpfer

Anwendung bei:

Extensor-S
Extensor-IN-S
Strecker
Dynamic-0-S
Move-0/5-S

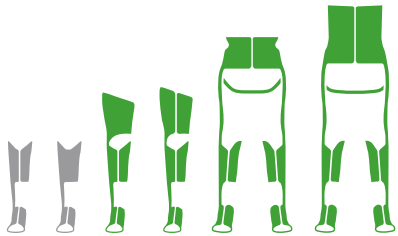

für Streckhilfe

Artikel-Nr.	für Zylinder-Durchmesser	Hub des Zylinders
Anziehhilfe-Rudi-12-50-klein	12 mm	40 und 50 mm
Anziehhilfe-Rudi-15-60-mittel	15 mm	50 und 60 mm
Anziehhilfe-Rudi-18-60-groß	18 mm	60 mm

► Auf den Seite 76 -79 finden sie die Anwendungsmöglichkeiten



Anziehhilfe-Rudi

Extensor-	Dynamic-	Move-
22, 25-Plus	-	25
28, 30, 30-Plus	28, 30, 32, 36	28, 30, 32, 36
34	-	40

