

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Blocker Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ **Extensionsstellung** in **0°, 10°, 20°** oder **30°**

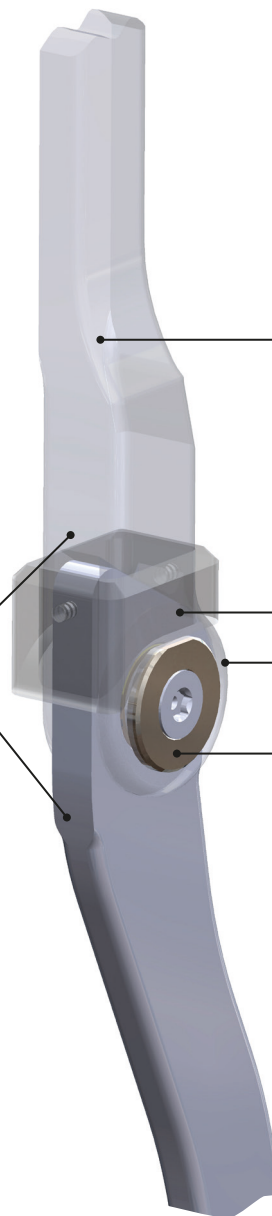


Abb. links

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kosten-
voranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese
mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität


Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl
mit Bronzebuchse


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

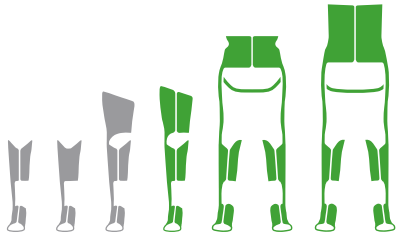


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

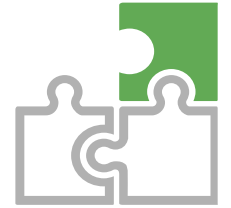

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	mit Winkel	KAFO	HKAFO/RGO
Blocker-25-	10-, 20-, 30- G	bis 20 kg	bis 15 kg
Blocker-28-	10-, 20-, 30- G	bis 30 kg	bis 20 kg
Blocker-30-	10-, 20-, 30- G	bis 35 kg	bis 30 kg
Blocker-32-	00-, 10-, 20-, 30- G	bis 50 kg	bis 40 kg
Blocker-36-	00-, 10-, 20-, 30- G	bis 70 kg	bis 50 kg
Blocker-40-	00-, 10-, 20-, 30- G	bis 85 kg	bis 65 kg
Blocker-40-Plus-	00-, 10-, 20- G	bis 85 kg	bis 85 kg

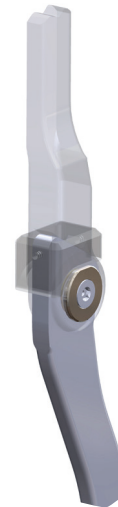

Blocker-20 Grad

Gelenk

Breite	Stärke	Stärke Fallschloß
25 mm	13,0 mm	16,5 mm
28 mm	15,0 mm	19,5 mm
30 mm	16,0 mm	20,5 mm
32 mm	17,0 mm	21,0 mm
34 mm	17,0 mm	21,0 mm
40 mm	21,0 mm	26,0 mm
40 mm	22,0 mm	28,0 mm



gesperrt



Streckung in



Beugung in

rückverlagert

modular


Kraftunterstützung




kein Feilen nötig



Sperrmechanismus

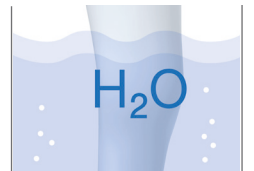

wasserbeständig

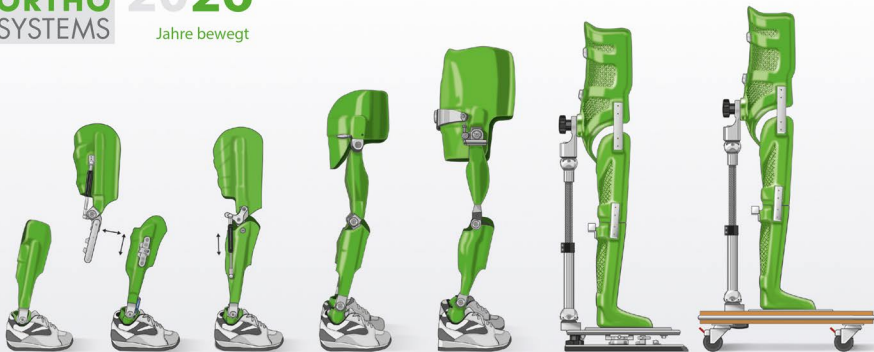

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de