

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Indi Kniegelenk



Ausstattung

Wasserfest für alle Anforderungen
Für **kleinste** bis **größte** Patient:innen

Mit **kurzem Anker oder langem Stabilitätsträger** zur Befestigung

+ **Extensionsstellung** von 5° und einer **Flexion** von 115°

+ **Rückverlagerung** entsprechend der Gelenkgröße

+ **Geräuschdämmung** für höhere Patientenakzeptanz
mit selbst sicherndem Gewindestift

Funktionserweiterung mit den **Zusatz Strecker**

Gelenk aus **hochfestem Titan**

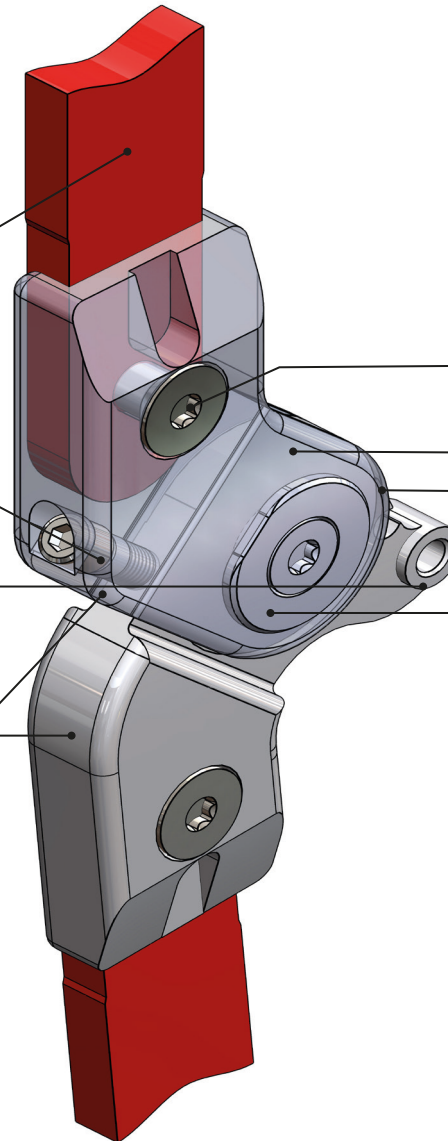


Abb. links

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kosten-
voranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger/Anker und versetzter Befestigungsschraube

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität


Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl
mit Bronzefachse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**


Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

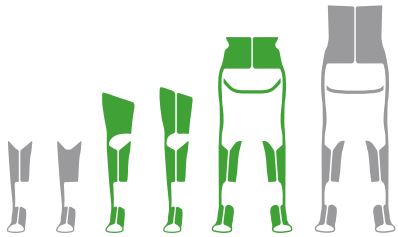


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk				
Artikel-Nr.	KAFO	HKAFO	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Rückverlagerung
Indi-25-Plus	bis 30 kg	bis 25 kg	93 mm	25 mm	12 mm	83 g	15,5 mm
Indi-28	bis 40 kg	bis 35 kg	103 mm	28 mm	14 mm	119 g	16,5 mm
Indi-30	bis 50 kg	bis 45 kg	112 mm	30 mm	16 mm	152 g	17,5 mm
Indi-30-Plus	bis 70 kg	bis 60 kg	112 mm	30 mm	16 mm	152 g	17,5 mm
Indi-34	bis 85 kg	bis 85 kg	123 mm	34 mm	19 mm	230 g	22,0 mm

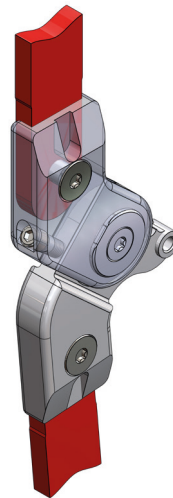

gesperrt	 Streckung in 5°	 Beugung in 115°	 rückverlagert	 modular	Kraftunterstützung	 kein Feilen nötig	 geräuschedämpft	 wasserbeständig
----------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

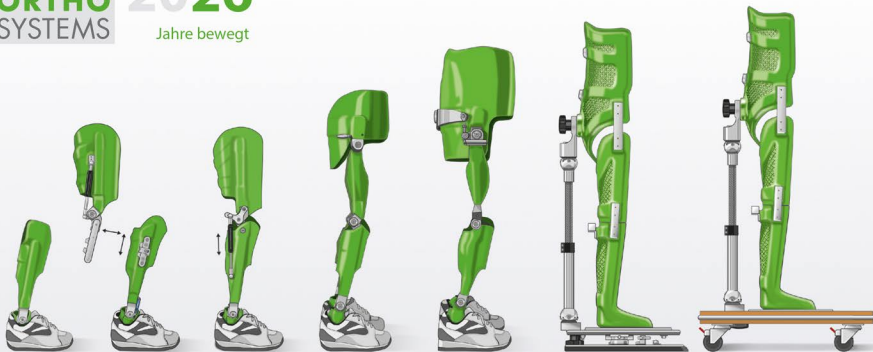

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwischuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de