

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Konso-5 Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

Funktionserweiterung mit den Zusätzen
Move-N oder **Move-S**

Maximale Flexion von **130°**

Mit **kurzem Anker** oder **langem Stabilitätsträger** zur Befestigung


+ Mit einer **Kröpfung von 5°** des Oberschenkels nach außen

Mit **federndem Druckstück** zur optionalen temporären Öffnung der Sperre

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ **Winkelanpassungen** von **0°** bis **40°** in **5°** Schritten

Unterteil mit Schwung oder gerade

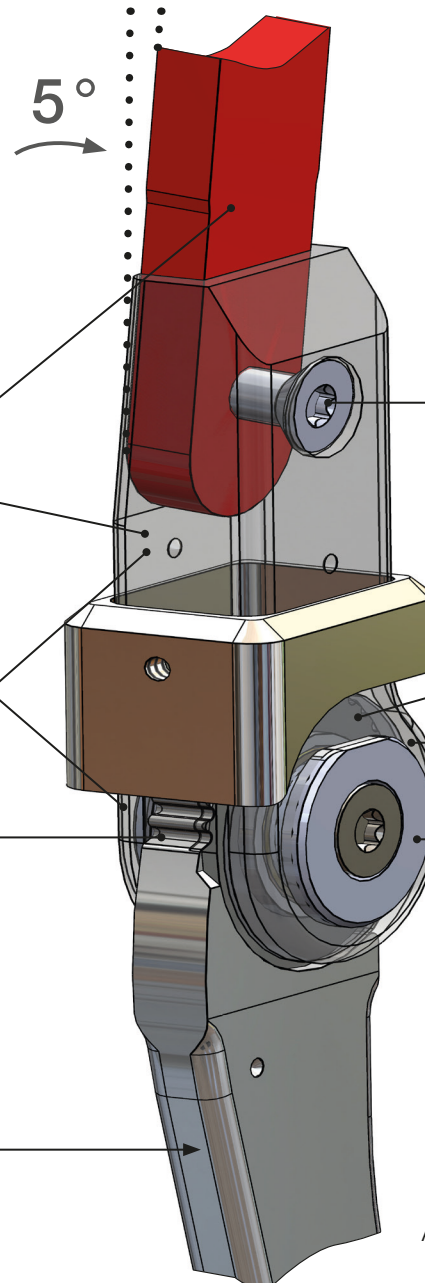

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kosten-
voranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger/Anker und versetzter Befestigungsschraube

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung


Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit
Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links

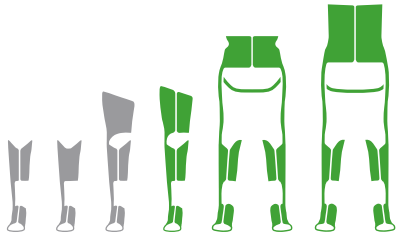


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

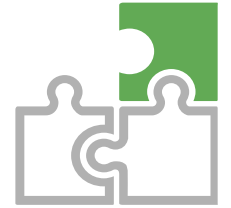

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	KAFO	HKAFO / RGO
Konso-5-25	bis 20 kg	bis 15 kg
Konso-5-28	bis 30 kg	bis 20 kg
Konso-5-30	bis 35 kg	bis 30 kg
Konso-5-32	bis 50 kg	bis 40 kg
Konso-5-36	bis 70 kg	bis 60 kg
Konso-5-40	bis 85 kg	bis 85 kg

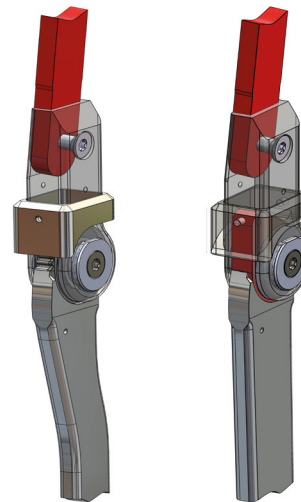

Konso-5 mit Schwung | Konso-5 gerade

Gelenk

Breite	Stärke	Stärke Fallschloß
25 mm	14,5 mm	17,5 mm
28 mm	16,5 mm	20,5 mm
30 mm	17,5 mm	21,5 mm
32 mm	19,5 mm	23,0 mm
36 mm	20,5 mm	24,0 mm
40 mm	22,0 mm	26,0 mm



gesperrt



Streckung in



Beugung in



rückverlagert



modular



Kraftunterstützung




kein Feilen nötig



Sperrmechanismus



wasserbeständig

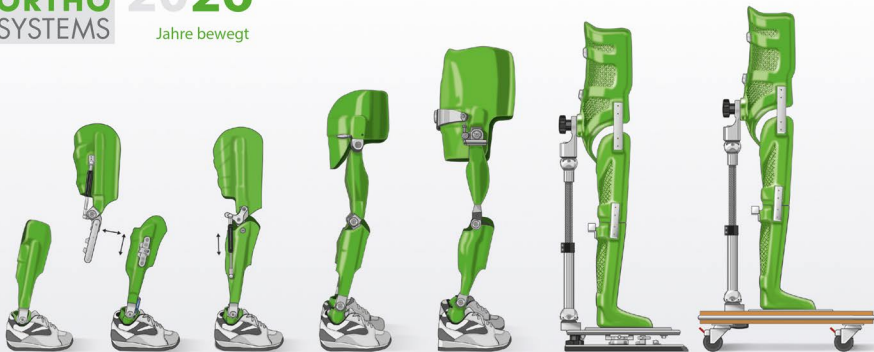

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de