

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Basic Knöchelgelenk



Ausstattung

Für ganz **kleine** Patient:innen

- + **Sichere fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase** durch anhaltenden Reibungswiderstand ohne Federmechanik
- + **Weiche Fersenabrollung durch** Reibungswiderstand

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**


Schnelle Änderungen der Bewegungsbegrenzung mit selbstsichernden Gewindestiften

Bewegungsausschlag von maximal **20°** Dorsalflexion und **20°** Plantarflexion möglich

Geräuschkämpfung für höhere Patientenakzeptanz

Bei einer Bewegungsbegrenzung von 12° Dorsalflexion und 12° Plantarflexion ist eine **Lotanpassung von 8°** möglich

Hohe Steifigkeit durch **Aluminium Fußbügel**

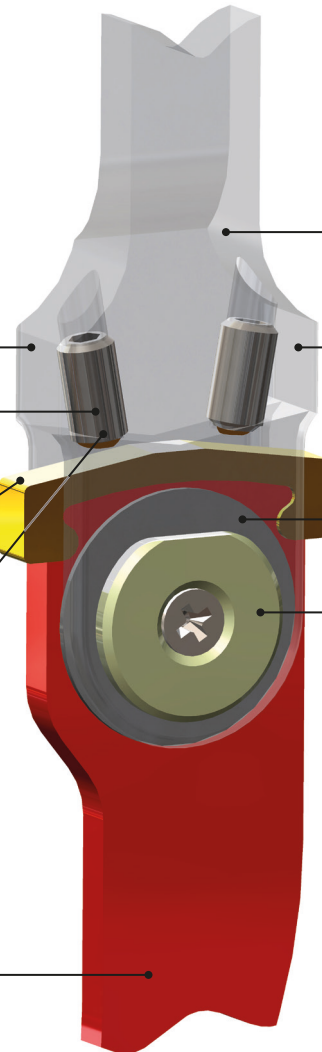

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzefuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**


Abb. links




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

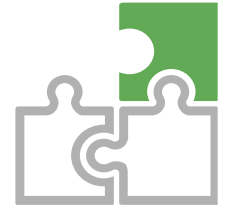

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk	
Artikel-Nr.	AFO/KAFO	HKAFO/RGO	Breite	Stärke
Basic-18	bis 10 kg	bis 10 kg	18 mm	8,0 mm

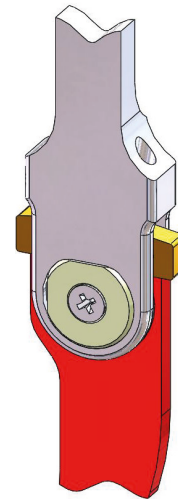

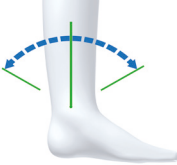									
Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs- begrenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	geräuschgedämpft	wasserbeständig

