

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Easy-A und Easy-T Knöchelgelenke



Ausstattung

Wasserfest für alle Anforderungen

+ Aktive Unterstützung während der **Standphase**

+ Aktive Unterstützung der **Fersenabrollung**

+ Sichere, fußhaltende Funktion in der **Schwungphase**

+ **Kräfte** in blau (leichte Kraft) und grün (kleine Kraft) oder nur **Bewegungsbegrenzer**

Geräuschdämmung für höhere Patientenakzeptanz

+ **Unabhängige Lotanpassung** von bis zu 10° nach vorne und 10° nach hinten

+ Robuste Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium oder Titan**

Spiralfedern und Kugeln aus **robustem Edelstahl**

Bewegungsbegrenzung aus **Bronze**

Bis **17° Dorsalflexion** und **17° Plantarflexion**

Mehr Stabilität durch spezielle Kontur des Fußbügels

Befestigungspunkte für eine präzise Armierung

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Mit **kurzem Anker oder langen Stabilitätsträger** zur Befestigung

Aus einem Teil **gefräste Gelenkgabel** für mehr Stabilität

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**


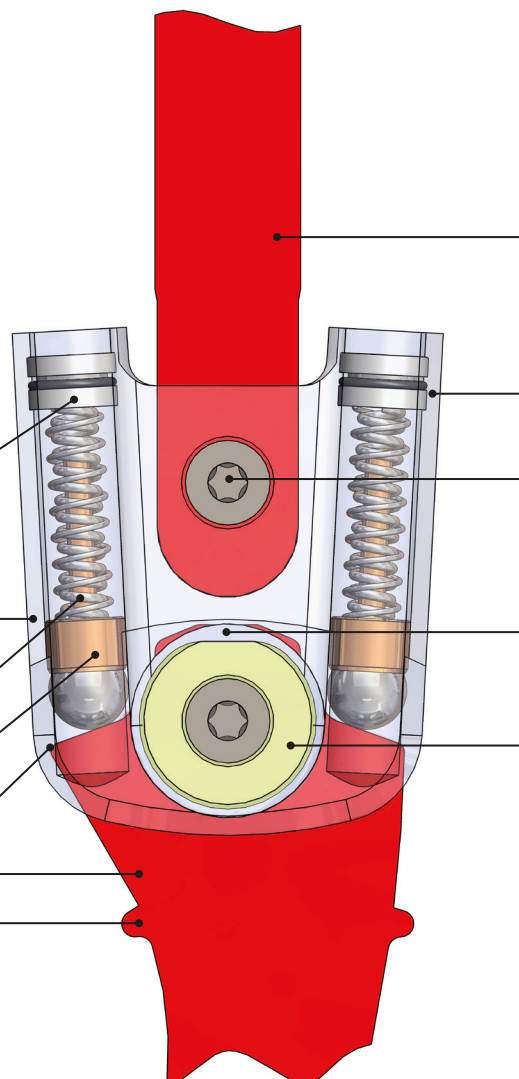


Abb. links




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

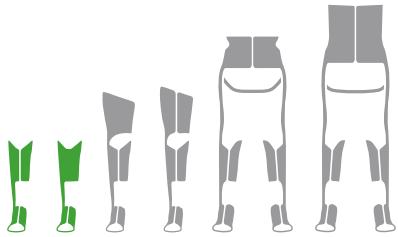


Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Gelenk


Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	AFO/KAFO	für mehr Kraft
Easy-A-19	Easy-T-19	bis 10 kg	bis 10 kg
Easy-A-22	Easy-T-22	bis 15 kg	bis 10 kg
Easy-A-25	Easy-T-25	bis 25 kg	bis 15 kg
Easy-A-28	Easy-T-28	bis 40 kg	bis 30 kg

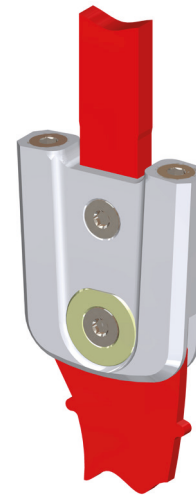

Breite	Stärke	Höhe
34 mm	9,0 mm	42 mm
39 mm	9,5 mm	46 mm
44 mm	11,5 mm	52 mm
49 mm	12,0 mm	58 mm

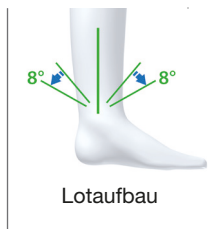


modular

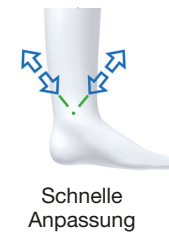

Wechselkeil



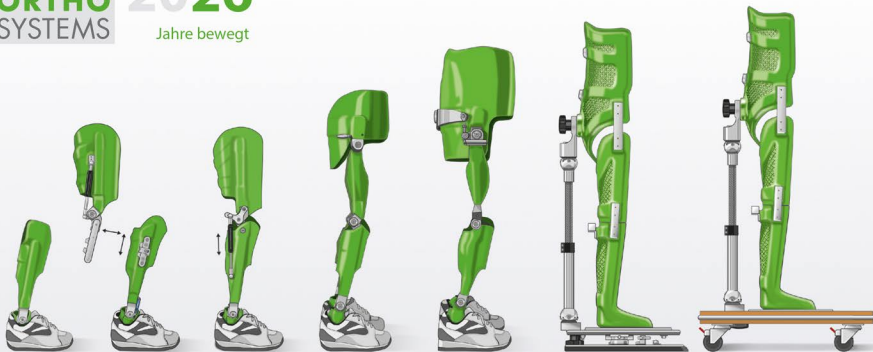

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de