

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Jumper Knöchelgelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **größte** Patient:innen

Durch das Wechselkeilsystem **kein Feilen** notwendig

+ **Sichere fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase** durch anhaltenden Reibungswiderstand ohne Federmechanik

+ **Weiche Fersenabrollung**

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium, Titan oder Edelstahl**

Die gefrästen Winkel der Messingkeile garantieren eine **gleichbleibende Bewegungsbegrenzung** über die gesamte Tragedauer der Orthese

Bis **12° Dorsalflexion** und **12° Plantarflexion**

Geräuschdämmung für höhere Patientenakzeptanz

Hohe Steifigkeit durch **Aluminium** oder **Edelstahl** Fußbügel

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Mit **kurzem Anker oder langen Stabilitätsträger** zur Befestigung

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger / Anker und versetzter Befestigungsschraube

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzefuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. rechts




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)


Artikel-Nr.	AFO	KAFO	HKAFO/RGO
Jumper-22	bis 15 kg	bis 15 kg	bis 15 kg
Jumper-25	bis 25 kg	bis 25 kg	bis 25 kg
Jumper-28	bis 35 kg	bis 35 kg	bis 35 kg
Jumper-32	bis 50 kg	bis 50 kg	bis 50 kg
Jumper-34	bis 70 kg	bis 70 kg	bis 70 kg
Jumper-34-Plus	bis 70 kg	bis 70 kg	-
Jumper-34-extra	bis 70 kg	-	-
Jumper-38	bis 85 kg	bis 85 kg	bis 90 kg
Jumper-38-Plus	bis 85 kg	bis 90 kg	-
Jumper-38-extra	bis 110 kg	-	-

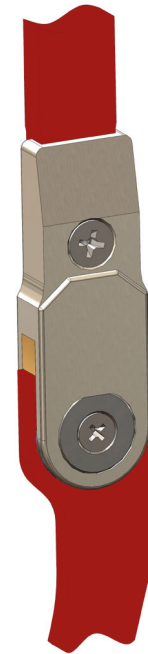

Gelenk

Breite	Stärke	Gabel	Fußbügel
22 mm	12,0 mm	Al	Al
25 mm	13,0 mm	Al	Al
28 mm	13,0 mm	Al	Al
32 mm	19,0 mm	Al	Al
34 mm	16,0 mm	Al	Al
34 mm	16,0 mm	Ti	Al
34 mm	16,0 mm	V2A	V2A
38 mm	20,0 mm	Al	Al
38 mm	20,0 mm	V2A	Al
38 mm	20,0 mm	V2A	V2A

Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs- begrenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	geräuschedämpft	wasserbeständig

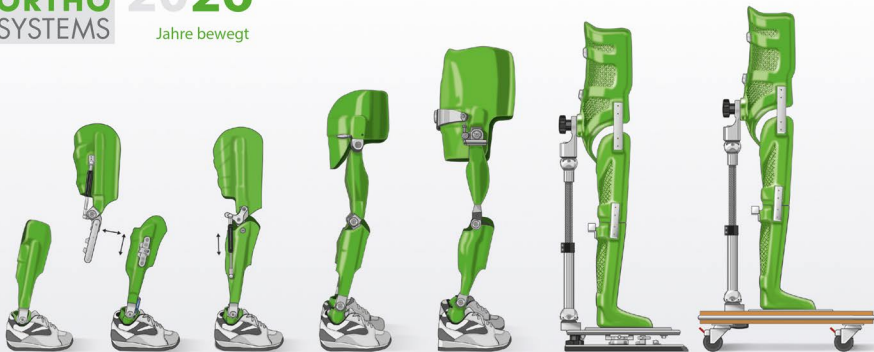

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de