

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Naveta Knöchelgelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

Durch das Wechselkeilsystem **kein Feilen** notwendig

+ **Sichere fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase** durch anhaltenden Reibungswiderstand ohne Federmechanik

+ **Weiche Fersenabrollung** durch Reibungswiderstand

Schnelle Änderungen der Bewegungsbegrenzung durch die Keilschublade

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**

Die gefrästen Winkel der Messingkeile garantieren eine **gleichbleibende Bewegungsbegrenzung** über die gesamte Tragedauer der Orthese

Bis **12° Dorsalflexion** und **12° Plantarflexion**

Geräuschkämpfung für höhere Patientenakzeptanz

Hohe Steifigkeit durch **Aluminium Fußbügel**

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. rechts




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.




Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk	
Artikel-Nr.	AFO/KAFO	HKAFO/RGO	Breite	Stärke
Naveta-22	bis 15 kg	bis 15 kg	22 mm	14,0 mm
Naveta-25	bis 25 kg	bis 25 kg	25 mm	14,5 mm
Naveta-28	bis 35 kg	bis 35 kg	28 mm	14,5 mm
Naveta-32	bis 50 kg	bis 50 kg	32 mm	19,0 mm
Naveta-34	bis 70 kg	bis 70 kg	34 mm	19,0 mm
Naveta-38	bis 85 kg	bis 85 kg	38 mm	22,0 mm



Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs- begrenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	Geräusch gedämpft	wasserbeständig
-----------	---------	--------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------

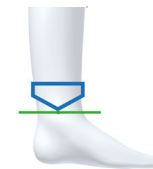

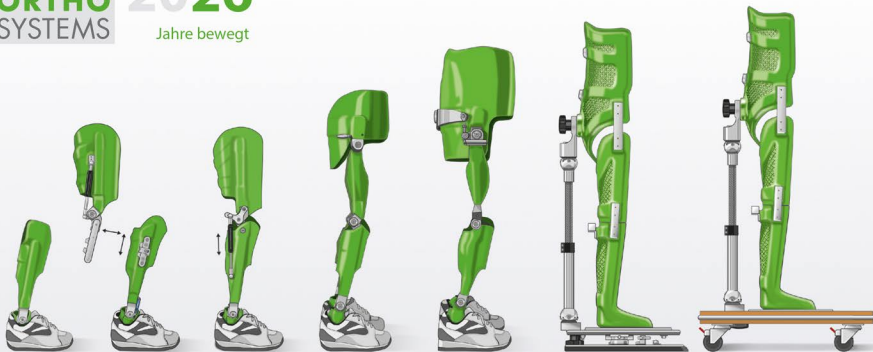

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de