

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Fokus 1D Hüftgelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**

+ Das teilbegrenzte Hüftgelenk **verhindert die Ab- und Adduktion** und hat eine **Schrittlängenbegrenzung von 12°**, die erweitert werden kann

+ **Flexionsbegrenzung** im Sitzen von **90°** die jedoch erweitert werden kann

+ Unterteil aus **hochfestem, gehärteten Stahl**

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Über den **Hebelmechanismus** wird das Gelenk wahlweise von hinten oder vorne angebracht und zum Sitzen geöffnet. Verriegelt wird die Sitzachse bei Streckung durch die vorgespannte Sperrfeder

Montiert mit selbstschmierenden Gelenkscheiben für eine leichte und spielfreie **Achsführung**

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus hochfestem Stahl mit Messingbuchse


Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links

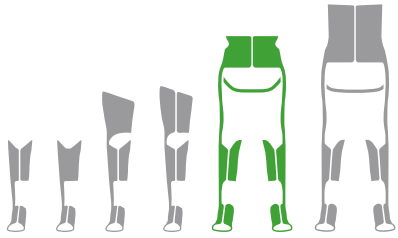


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

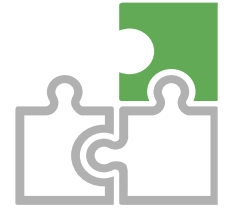

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	HKAFO	Gelenk		
			Breite	Stärke	Höhe
Fokus-1D-infant	Fokus-1D-AG-infant	bis 15 kg	25 mm	20,0 mm	94,0 mm
Fokus-1D-klein	Fokus-1D-AG-klein	bis 20 kg	30 mm	23,0 mm	112,5 mm
Fokus-1D-klein-Plus	Fokus-1D-AG-klein-Plus	bis 30 kg	30 mm	23,0 mm	114,0 mm
Fokus-1D-mittel	Fokus-1D-AG-mittel	bis 40 kg	36 mm	29,0 mm	127,5 mm
Fokus-1D-groß	Fokus-1D-AG-groß	bis 60 kg	36 mm	29,0 mm	127,5 mm
Fokus-1D-ex-groß	Fokus-1D-AG-ex-groß	bis 85 kg	45 mm	36,0 mm	151,0 mm

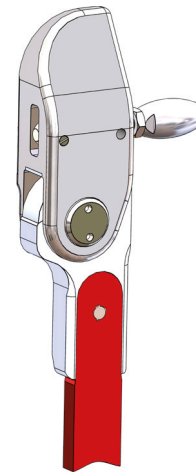


AG= auf Maß angerichtet




teilbegrenzt



Sperrmechanismus

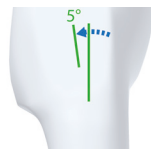

Extension

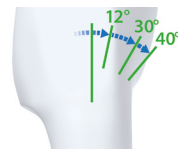

Flexion


Schrittlänge

mit Beckenrotation

Abduktion



und Adduktion

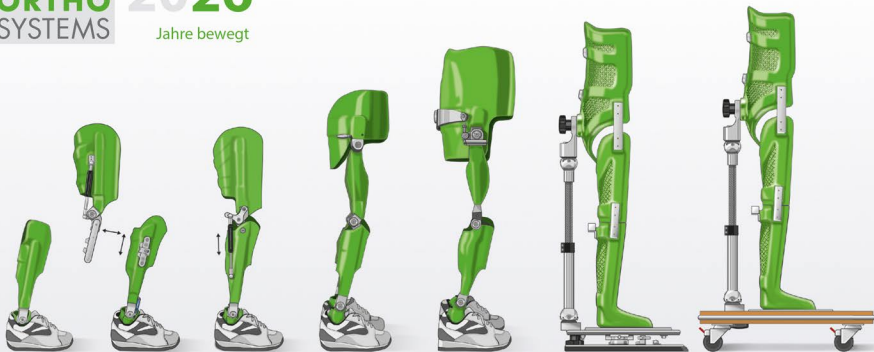

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de